



Models 844KL / 844KL-USB Digital Floor Scale



User Instructions



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA www.homscales.com

Health o meter® Professional 844KL

© Pelstar, LLC 2023

weigh**easier**®

Please register your scale for warranty coverage at:
www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:
www.homscales.com

CAUTIONS AND WARNINGS / SPECIFICATIONS / CERTIFICATIONS / SERVICE

Cautions and Warnings

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale with anything on the platform.
- For accurate weighing, the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before each use.
- Do not use in the presence of flammable materials.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications

This digital floor scale displays weight in pounds, kilograms or stones. It also features a weight hold that allows the weight measurement to stay displayed for 5 seconds after stepping off scale. Each precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and provides features that make the weighing process simple, fast and convenient. This scale is set up to determine the weight of a stationary patient.

Capacity and Resolution	Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolution: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Environmental	Operating temperatures: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Storage temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 125°F) Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage	
Physical Dimensions	Platform Size: Width: 12 5/8" (321 mm) Depth: 12 5/8" (321 mm) Height: 1 7/8" (48 mm)	Product Footprint: Width: 12 5/8" (321 mm) Depth: 12 5/8" (321 mm) Height: 1 7/8" (48 mm) Weight: 4 lb (1.8 kg)

Certifications

 	Pelstar, LLC has been officially certified as the manufacturer of Health o meter® Professional medical devices. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the development, production, sales and service of medical scales and measuring systems.
--	--

Customer Service Information

This scale is shipped assembled in one carton. Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact Customer Service.

For further information or telephone support, please contact Customer Service at:

Telephone: 1 (800) 815-6615

Email: HomProCS@homscales.com

Note: This scale has been factory calibrated and cannot be calibrated by the user.

SET-UP INSTRUCTIONS

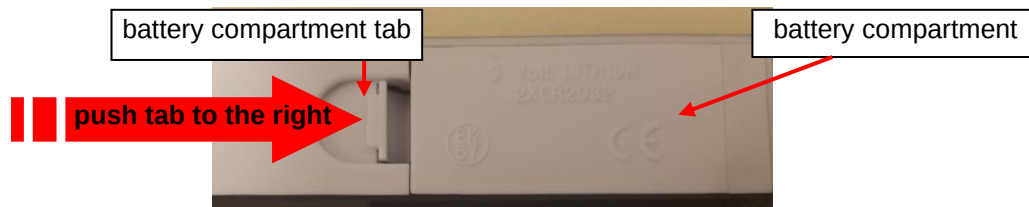
To avoid damaging the scale when unpacking it, **do not use a box cutter, knife, scissors or any sharp object to open the protective inner packaging.** Remove scale from the carton and unwrap packing material carefully, to prevent scratching the unit. Set the carton aside for storage.

Battery Instructions

The scale is shipped without batteries already installed. The batteries are included in a small plastic bag. Follow these instructions to insert the batteries on a new scale or to replace depleted batteries on your current scale. The battery compartment is located on the underside of the scale.

1. To open the battery cover, push the battery compartment tab to the right and lift upwards.


Note: You do NOT need to remove any screws to open the battery compartment.



2. Install two new AAA batteries. Follow the battery illustration to ensure the batteries are inserted in the proper direction




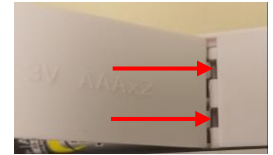3. Replace the battery compartment cover by sliding the end of the cover into the battery compartment. Then push down on the tab and compartment to ensure the battery cover is firmly attached. You do NOT need the screw to close the battery compartment. You may use the screw to further secure the battery compartment if desired. Do not use the scale without the battery compartment cover attached.



Selecting the Weight Mode (Kilograms/KG, Pounds/LB, or Stones/ST)

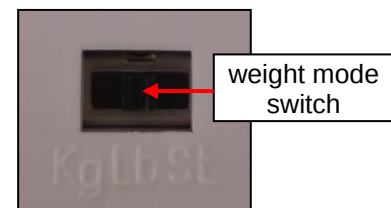1. To select the weight mode, turn the scale over to access the weight mode switch.
2. Slide the switch to the desired weight mode.
3. The far left position is for Kilograms. Center position is for Pounds. The far right position is for Stones.








Connectivity Option

The 844KL-USB includes a USB port for connectivity to a PC or other device. To learn more about the connectivity options for this scale, please contact Health o meter® Professional Customer Service at 1-800-815-6615 or homprocs@homscales.com.





OPERATING INSTRUCTIONS

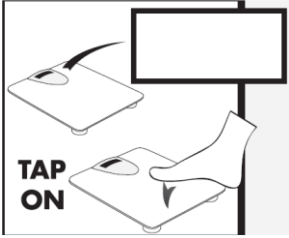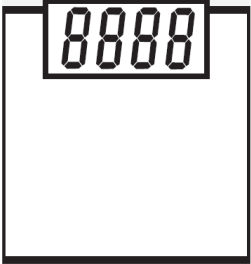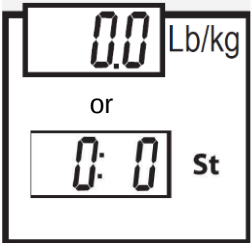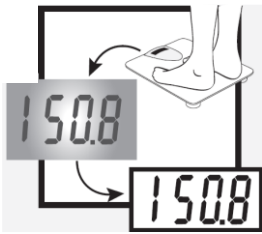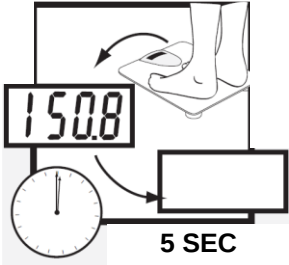Measuring Weight

1. To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform.	
2. Four digits will appear on the display.	
3. Wait for 0.0 to appear on the display.	
4. Step onto the scale. Stand still until weight appears.	
5. After the weight has locked, the measurement will flash on the display.	
6. Weight will remain displayed for 5 seconds after stepping off the scale.	

TROUBLESHOOTING / MAINTENANCE & CLEANING

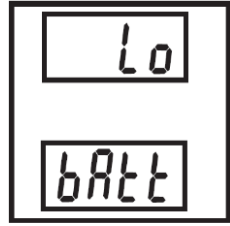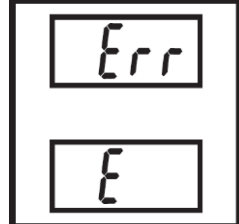Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting Customer Service.

If the display shows “Lo bAtt” message, replace batteries per the instructions on page 4.	
If the display shows “Err E” the load on the scale exceeds the capacity. 844KL Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st	

For further assistance please contact technical support toll free at 1 (800) 638-3722.

Maintenance

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check overall appearance of the entire scale for any obvious damage, wear and tear.
2. Do not store near chemicals, heaters or radiators.
3. Do not drop, kick, or jump on the scale.
4. This scale is a sensitive weighing device. Do not store anything on top of the scale platform.
5. If your scale fails to work properly, do not attempt to dismantle it. This will void your warranty.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using a mild soap and water solution on a soft cloth or disposable wipe:
2. After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry after cleaning.
3. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale's finish.
4. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
5. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

WARRANTY

1-Year Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A# _____

Return Department

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.

Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC.

We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2023



Modelos 844KL / 844KL-USB Báscula de Piso Digital



Instrucciones



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A. www.homscales.com

Health o meter® Profesional 844KL

© Pelstar, LLC 2023

weigh**easier**®

Registre su báscula para recibir la cobertura de la garantía en el sitio:

www.homscales.com

Para obtener actualizaciones y revisiones de las instrucciones, visite el sitio:

www.homscales.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y advertencias

A fin de evitar lesiones y daños a su báscula, siga cuidadosamente estas instrucciones.

- No transporte la báscula con nada colocado sobre la plataforma.
- Para un pesaje preciso, la báscula deberá colocarse sobre una superficie plana y estable.
- Para un pesaje preciso, verifique el correcto funcionamiento de la báscula conforme al procedimiento descrito en este manual antes de cada uso.
- No utilice la báscula ante la presencia de materiales inflamables.

Pelstar, LLC no se hará responsable bajo ninguna circunstancia por daños o lesiones derivados de o relacionados con la instalación, uso o uso indebido de sus productos.

Especificaciones

Esta báscula de piso digital muestra el peso en libras, kilogramos o stones. Adicionalmente, cuenta con una función de retención de peso que permite que el peso medido permanezca en la pantalla durante 5 segundos después de que el paciente se baje de la báscula. Cada báscula de precisión está diseñada para proporcionar mediciones de peso precisas, confiables y repetibles, contando con características que hacen que el proceso de pesaje sea simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente inmóvil.

Capacidad y resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Ambiente	Temperatura de operación: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperatura de almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad máxima: 85% HR en operación o en almacenamiento	
Dimensiones físicas	Tamaño de la plataforma: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Alto: 1 7/8" (48 mm)	Superficie del producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Alto: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

 	Pelstar, LLC ha sido certificada oficialmente como fabricante de dispositivos médicos de Health o meter® Professional. El sistema de garantía de calidad de Pelstar, LLC incluye el desarrollo, producción, ventas y servicio para básculas médicas y sistemas de medición.
--	---

Información de servicio al cliente

Esta báscula se envía armada dentro de una caja. Revise cuidadosamente que la caja no presente daños sufridos durante el envío antes de desempacarla. Si se encuentran daños, comuníquese con servicio al cliente.

Para mayor información o asistencia telefónica, comuníquese con Servicio al cliente al:

Teléfono: 1 (800) 815-6615 Correo electrónico: HomProCS@hom scales.com

Nota: Esta báscula viene calibrada de fábrica y no podrá ser calibrada por el usuario.

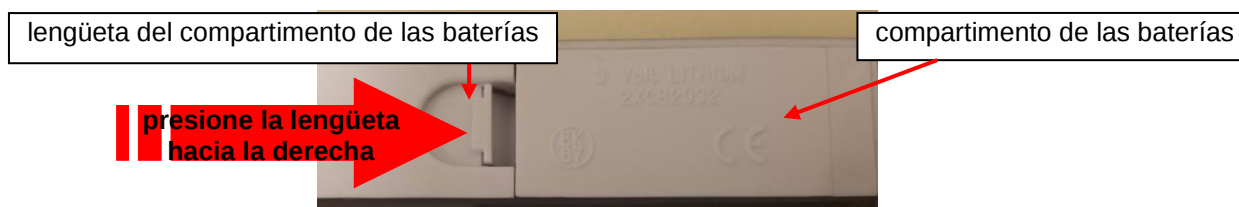
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar dañar la báscula al desempacarla, **no utilice una navaja para abrir cajas, cuchillo, tijeras ni ningún objeto afilado para abrir el empaque interior de protección.** Saque la báscula de la caja y retire el material de empaque con cuidado a fin de evitar rayar la unidad. Guarde la caja de cartón para su almacenamiento.


Instrucciones de las baterías

La báscula se envía sin baterías previamente instaladas. Las baterías se incluyen dentro de una pequeña bolsa de plástico. Siga estas instrucciones para insertar las baterías en la báscula nueva o para reemplazar las baterías descargadas en su báscula actual. El compartimento de las baterías se encuentra en la parte inferior de la báscula.


1. Para abrir la tapa de la batería, presione la lengüeta del compartimento de las baterías hacia la derecha y jale hacia arriba. **Nota:** NO es necesario quitar ningún tornillo para abrir el compartimento de las baterías.



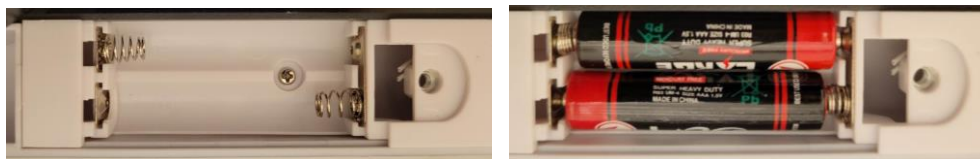2. Instale dos baterías AAA nuevas. Vea la ilustración de las baterías para asegurarse de que las baterías estén insertadas en la dirección correcta




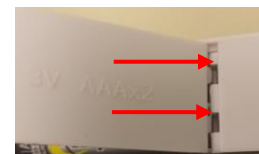3. Coloque la tapa del compartimento de la batería deslizando el extremo de la tapa hacia el compartimento. Posteriormente, presione la lengüeta y el compartimento para asegurarse de que la tapa de la batería esté sujeta firmemente. NO se requiere el tornillo para cerrar el compartimento de las baterías. Si lo desea, puede usar el tornillo para asegurar aún más el compartimento de las baterías. No utilice la báscula sin colocar la tapa del compartimento de las baterías.



Selección del modo de pesado (Kilogramos/KG, Libras/LB o Stones/ST)

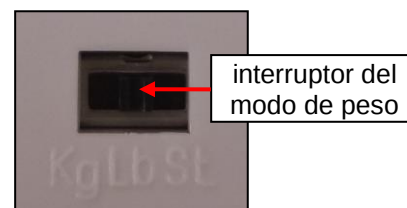1. Para seleccionar el modo de peso, gire la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor al modo de peso deseado.
3. La posición hacia la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición hacia la derecha es para Stones.









Opción de conectividad

La báscula 844KL-USB incluye un puerto USB para conectarse a una PC o a otro dispositivo. Para mayor información sobre las opciones de conectividad de esta báscula, comuníquese con Servicio al cliente de Health o meter® Profesional al teléfono 1-800-815-6615 o ingrese a homprocs@hompscales.com.





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

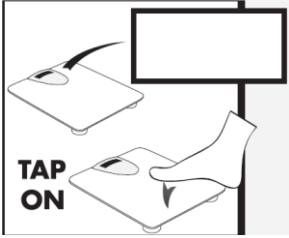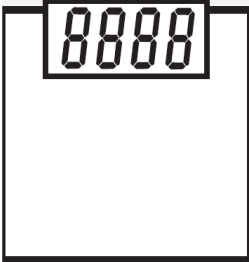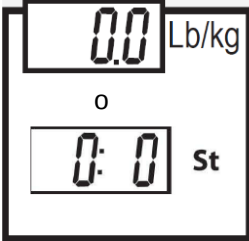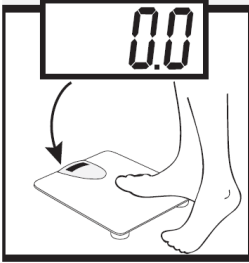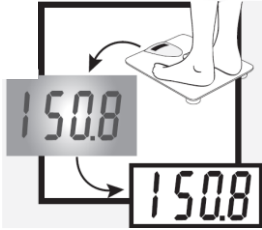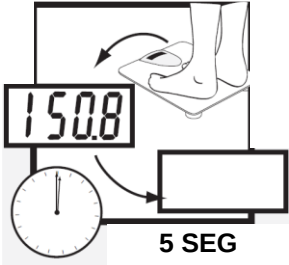Medición de peso

2. Para encender la báscula, de un ligero golpe con el pie al centro de la plataforma.	
4. Aparecerán cuatro dígitos en la pantalla.	
5. Espere a que la pantalla muestre 0.0.	
7. Suba a la báscula. Manténgase quieto hasta que se muestre su peso.	
8. Una vez que el peso se haya fijado, la medición parpadeará en la pantalla.	
9. El peso permanecerá en la pantalla durante 5 segundos después de que el paciente se baje de la báscula.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

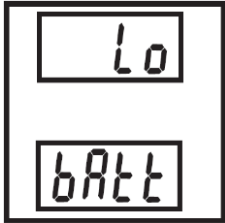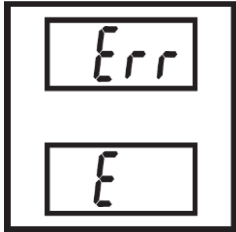Consulte las siguientes instrucciones a fin de verificar y corregir cualquier falla antes de comunicarse con el Servicio al Cliente.

Si la pantalla muestra el mensaje "Lo bAtt", reemplace las baterías siguiendo las instrucciones de la página 4.	
Si la pantalla muestra "Err E", la carga colocada sobre la báscula excede su capacidad. Capacidad de la 844KL: 440 lb / 200 kg / 31 st	

Para recibir mayor ayuda, comuníquese sin costo con el servicio de asistencia técnica llamando al número 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso o después de largos períodos de inactividad, verifique que la báscula funcione correctamente. En caso contrario, consulte a personal de servicio calificado.

1. Verifique la apariencia general de toda la báscula en busca de daños obvios y desgaste.
2. No la guarde cerca de productos químicos, calentadores o radiadores.
3. No la deje caer, patear ni saltar sobre ella.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesaje sensible. No almacene nada sobre la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula no funciona correctamente, no intente desarmarla. Esto invalidará su garantía.

Limpieza y desinfección

El cuidado y la limpieza adecuados son esenciales para garantizar una larga vida útil de pesaje preciso y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución ligera de agua y jabón en un paño suave o toallita desechable:
2. Tras limpiar/desinfectar la báscula, límpiela con un paño húmedo y posteriormente con un paño limpio y seco. A fin de evitar la acumulación de residuos o superficies húmedas, asegúrese de que todas las piezas de la báscula estén completamente secas al terminar limpieza.
3. Nunca use materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que dañarán el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua ni en ningún otro líquido.
5. No vierta ni rocíe líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año

¿Qué cubre la Garantía?

Este producto de Health o meter® Professional está garantizado a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. En caso de que el producto no funcione correctamente, devuélvalo, con flete prepago y debidamente empacado a Pelstar, LLC (consulte la sección de "Cómo obtener el servicio de garantía" a continuación para obtener instrucciones). En caso de que el fabricante determine que existe un defecto en materiales o de mano de obra, la única solución para el cliente será el reemplazo de la báscula sin costo. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. En caso de que el producto ya no se encuentre disponible, se podrá reemplazar con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las partes reemplazadas estarán cubiertas únicamente dentro del período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto deberá contar con un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Guarde su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ningún modo los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué se excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños derivados de cualquiera de lo siguiente: mal uso o uso incorrecto del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso distinto a las instrucciones de operación, abuso, incluyendo la manipulación indebida, daños durante el transporte o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Asimismo, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, adicionales a cualquier otro derecho con el cual pueda contar, lo cual podría variar dependiendo del país, estado, provincia o jurisdicción.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al número (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), el cual deberá incluirse en la etiqueta de devolución. Anexe el comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número para recibir llamadas durante el día y la descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con envío y seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Atención R/A No. _____

Departamento de devoluciones

9500 West 55th Street

McCook, Illinois 60525



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA RECIBIR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA EN EL SITIO:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos de Health o meter® Professional son fabricados por, están diseñados por y son propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2023