


## LA 2620KL

# BÁSCULA DIGITAL PARA SILLA DE RUEDAS CON RAMPAS DOBLES Y PLATAFORMA EXTRAGRANDE, COMPATIBLE CON ADA\*

La completamente digital 2620KL está diseñada con elementos de seguridad para asegurar una experiencia de pesaje cómoda para los pacientes en silla de ruedas. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las dobles rampas cuentan con un índice de pendiente de 1:8. las rampas y la plataforma extra grande de 32" x 40" cuentan con protectores de borde de 2" que previene caídas de la silla, así como una cinta antiderrapante en las rampas para brindar seguridad adicional. La plataforma es plegable para facilidad de almacenamiento, y las ruedas giratorias integradas se incluyen para mayor conveniencia y movilidad. La báscula tiene una capacidad de peso de hasta 1,000 libras (454 kilogramos). Diseñada para cumplir con los estándares de la Junta de Acceso de Estados Unidos, la 2620KL es ideal para consultorios, hospitales, clínicas, así como centros de cuidado intensivo o de largo plazo. Adicionalmente, cuenta con un teclado antimicrobiano, una pantalla giratoria con rotación de 180° y una plataforma antiderrapante de gran tamaño.

La báscula cuenta con una pantalla a color de alto contraste con funciones amigables con el usuario, como IMC, retención/liberación, volver a pesar, memoria, cero, KG/LB, tara y pretara. La función Everlock® fija de forma permanente la unidad de pesaje (LB o KG). Con una interfaz USB, se integra eficientemente con sistemas de EMR y se conecta a dispositivos por medio de las Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional.

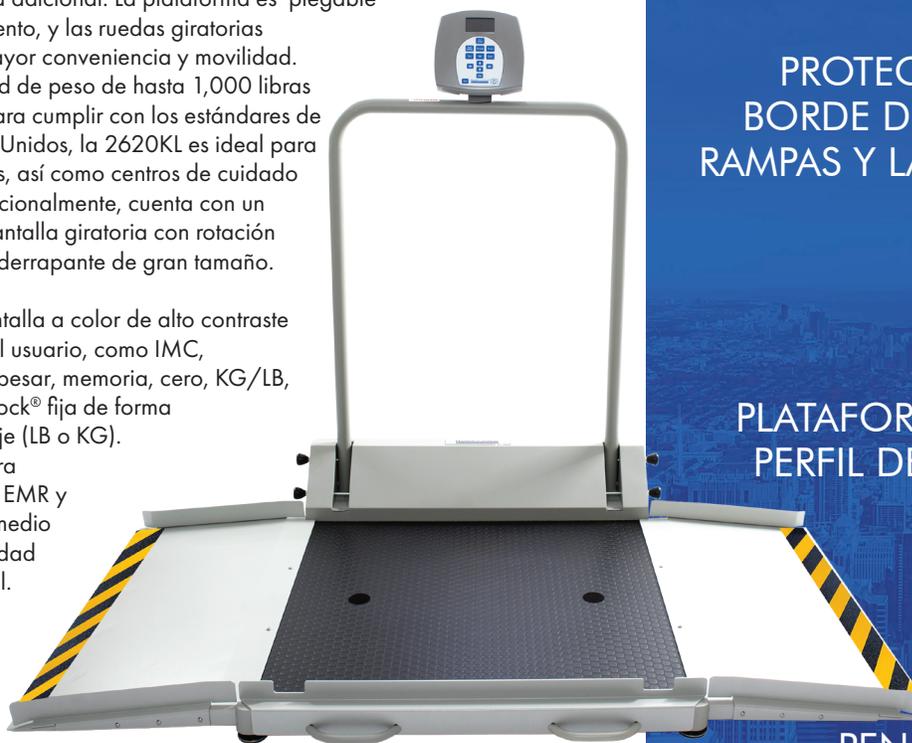

La báscula para silla de ruedas 2620KL está diseñada para cumplir con los estándares de las Juntas de Acceso de Estados Unidos: Los centros de atención médica operados por gobiernos estatales y locales, conocidos también como entidades públicas, deberán cumplir con los Estándares para Equipo de Diagnóstico Médico para Equipo de Diagnóstico Médico Accesible, exigidos por el Departamento de Justicia.

- Plataforma de 32" de largo x 40" de ancho
- Protector de borde de 2" en la plataforma
- Protectores de borde de 2" en las rampas
- Pendiente de 1:8

Revisado para cumplimiento con la ADA y  
Certificado Platino por Corada

**Health o meter®**  
Professional

Health o meter® Professional 2620KL



REVIEWED FOR ADA COMPLIANCE  
CERTIFICATION No. 4477888

## HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2620KL ofrezca una experiencia de pesaje segura y accesible.

**100%**  
COMPATIBLE CON ADA

PROTECTORES DE  
BORDE DE 2" EN LAS  
RAMPAS Y LA PLATAFORMA

PLATAFORMA DE BAJO  
PERFIL DE 32" X 40"

PENDIENTE  
DE 1:8

LA MARCA #1 EN  
CONFIANZA

weigh**easier**®

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Capacidad

1000 lb / 454 kg

## Resolución

0.2 lb / 0.1 kg

## Conectividad EMR

Por medio de USB o tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

## Pantalla

Tamaño de los dígitos: 3/8" / 10 mm

Tamaño de la pantalla: Pantalla TFT-LCD a color de alto contraste de 2 3/4" x 1 1/2"

## Fuente de alimentación

Adaptador de 100-240V (ADPT30) incluido, 6 baterías D no incluidas

## Funciones

Conversión entre LB/KG

Fijación de LB/KG

IMC

Cero

Tara

Pretara

Retención/liberación

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Hora/fecha

Tiempo de apagado automático variable

Opción de sonido apagado/encendido

Función de pesaje padre/hijo

Everlock®

## Tamaño de la plataforma (largo x ancho x alto)

40" x 32 1/4" x 1 7/8"

(1016 mm x 819 mm x 48 mm)

## Tamaño de la rampa

32 1/4" x 16"

(819 mm x 406 mm)

## Tamaño de los protectores de borde (largo x ancho x alto)

40" x 1/8" x 2"

(1016 mm x 3 mm x 51 mm)

## Dimensiones del producto

77 1/4" x 43 7/8" x 48 3/4"

(1962 mm x 1114 mm x 1238 mm)

## Peso del producto

126 lb / 57 kg

## Portabilidad

4 ruedas (2 ruedas giratorias) para facilidad de movimiento

## Garantía

Garantía limitada de 2 años con el fabricante

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2620KL	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, LB y KG*
2620KG	Báscula digital para silla de ruedas con rampas dobles y plataforma extragrande, compatible con ADA, sólo KG*
SS-2620KL	Garantía extendida ScaleSurance® de 2 años para básculas de la serie 2620*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para reemplazo o refacción
PLUGSET30	Adaptador para usar la báscula fuera de Norteamérica
BTPRINTERKIT-01	Kit de impresora térmica inalámbrica

La báscula incluye además capacidad de conectividad. Consulte las opciones de conectividad en la página [homscal.es.com/ConnectivitySolutions](http://homscal.es.com/ConnectivitySolutions)

Para conocer más, llame al número  
**1-800-815-6615** o visite  
**homscal.es.com/2620KL**



La plataforma es plegable para facilidad de movilidad y almacenamiento

**Health o meter®**  
Professional



\*ADA: Ley de EE.UU. para Personas con Discapacidades  
No disponible en todos los países.